

EN

Description

Adjustable glasses comprising 2 movable parts per lens. The power of each lens changes when the 2 parts move relative to one another.

Indications

This device is intended for long sightedness, short sightedness and presbyopia only. See specifications for power range.

Specifications

Lens power: -6.0 to +3.0 dioptres
Frame measurement: 49□22, 141 mm
Centration distance: 63 mm

Contents

Glasses with case: 1
Instructions for Use: 1

Directions for Use

Power Adjustment

1. Turn both dials forward and place glasses on head.
2. Cover left eye and turn right dial backwards until focus is achieved.
3. Make fine adjustments by turning dial forwards or backwards.
4. Cover right eye and turn left dial backwards until focus is achieved.
5. Make fine adjustments by turning dial forwards or backwards.
6. Your glasses are ready for use.

Disposal of devices

Dispose of device in accordance with local regulations.

Storage

Store this device in its protective case when not in use.

Cleaning Instructions

Use a lens cloth dampened with lens solution or soapy water to clean lenses. Dry lenses by rubbing lenses gently with a clean soft cloth (do not use tissue). Do not submerge lenses in liquid.

Warning

- This device is not intended to replace the need for regular examinations of eye health.
- This device should not be used for high-risk tasks.
- Not for use as eye protection.

Cautions

- Should this device cause any discomfort, do not wear.
- This device is not intended for astigmatism.
- This is a temporary device designed for short term use.
- Handle and clean with care.

FR

Description

Lunettes réglables comportant 2 parties amovibles par verre. La puissance de chaque verre change lorsque les 2 parties se déplacent l'une par rapport à l'autre.

Indications

Ce produit est destiné aux personnes hypermétropes, myopes et presbytes uniquement. Consultez les caractéristiques techniques pour connaître la plage de puissance.

Caractéristiques techniques

Puissance des verres : -6 à +3 dioptries
Mesure de la monture : 49□22, 141 mm
Distance de centrage : 63 mm

Contenu

Lunettes avec étui : 1
Mode d'emploi : 1

Instructions

Réglage de la puissance

1. Tournez les deux cadrans vers l'avant et placez les lunettes sur le visage.
2. Couvrez l'œil gauche et tournez le cadran droit vers l'arrière jusqu'à ce que la mise au point soit terminée.
3. Affinez le réglage en tournant le cadran vers l'avant ou vers l'arrière.
4. Couvrez l'œil droit et tournez le cadran gauche vers l'arrière jusqu'à ce que la mise au point soit terminée.
5. Affinez le réglage en tournant le cadran vers l'avant ou vers l'arrière.
6. Vos lunettes sont prêtes à l'emploi.

Mise au rebut

Éliminez cet article conformément aux réglementations locales.

Stockage

Stockez cet article dans son étui de protection lorsqu'il n'est.

Instructions de nettoyage

Utilisez un chiffon pour verres humecté de solution pour verres ou de l'eau savonneuse pour nettoyer les verres. Essuyez les verres en les frottant délicatement avec un chiffon doux propre (n'utilisez pas de mouchoir en papier). Ne plongez pas les verres dans un liquide.

Avertissement

- Cet article n'est pas destiné à se substituer à des examens oculaires réguliers.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour des tâches à haut risque.
- Il ne doit pas être utilisé en tant que protection oculaire.

Mises en garde

- Dans l'éventualité où cet article entraînerait une gêne, quelle qu'elle soit, ne le portez pas.
- Ce produit n'est pas destiné aux personnes astigmates.
- Il s'agit d'un dispositif provisoire conçu pour une utilisation à court terme.
- Manipulez-le et nettoyez-le avec soin.

DE

Beschreibung

Stärkenvariable Brille mit 2 beweglichen Elementen pro Linse. Die Brechkraft jeder Linse ändert sich, wenn die beiden Elemente relativ zueinander bewegt werden.

Indikationen

Diese Brille ist ausschließlich für die Anwendung bei Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit und Altersfehsichtigkeit vorgesehen. Siehe Produktangaben zum Brechkraftbereich.

Produktangaben

Linsenbrechkraft: -6,0 bis +3,0 Dioptrien
Gestellabmessungen: 49□22, 141 mm
Zentrierpunktabstand: 63 mm

Inhalt

Brille mit Etui: 1
Gebrauchsanweisung: 1

Gebrauchsanweisung

Brechkrafteinstellung

1. Drehen Sie die beiden Knöpfe nach vorne und setzen Sie die Brille auf.
2. Decken Sie das linke Auge ab und drehen Sie den rechten Knopf nach hinten, bis die richtige Sehschärfe erreicht ist.
3. Indem Sie den Knopf nach vorne oder hinten drehen, können Sie die Sehschärfe genauer abstimmen.
4. Decken Sie das rechte Auge ab und drehen Sie den linken Knopf nach hinten, bis die richtige Sehschärfe erreicht ist.
5. Indem Sie den Knopf nach vorne oder hinten drehen, können Sie die Sehschärfe genauer abstimmen.
6. Ihre Brille ist nun einsatzbereit.

Entsorgung dieses Produkts

Entsorgen Sie diese Brille gemäß den geltenden Vorschriften.

Aufbewahrung

Bewahren Sie die Brille im mitgelieferten Schutzetui auf, wenn Sie sie nicht aufsetzen.

Reinigungsanweisungen


Verwenden Sie ein mit Linsenreiniger oder Spülmittellösung angefeuchtetes Brillentuch, um die Gläser zu reinigen. Reiben Sie die Gläser sanft mit einem sauberen, weichen Tuch trocken (verwenden Sie kein Papiertaschentuch). Tauchen Sie die Gläser nicht in Flüssigkeit ein.

Warnhinweise

- Diese Brille ist kein Ersatz für regelmäßige augenärztliche Untersuchungen.
- Diese Brille darf nicht in Situationen mit erhöhtem Gefährtenrisiko getragen werden.
- Nicht als Augenschutz verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Tragen Sie die Brille nicht, wenn Sie Ihnen Beschwerden bereitet.
- Diese Brille ist bei Astigmatismus nicht geeignet.
- Sie ist für die vorübergehende, kurzzeitige Anwendung vorgesehen.
- Die Gläser dieser Brille sind nicht kratzfest. Achten Sie daher auf schonende Handhabung und Reinigung.

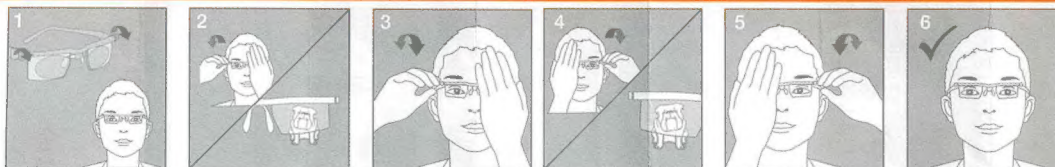

Zeito Plastic Components SDN BHD Lot 19-6, Bersatu Industrial Complex
Jalan CJ 1/1, Cheras Jaya, Selangor D. E. 43200 Malaysia

Document Revision Number/Numéro de révision du document/
Versionsnummer des Dokuments: EM02-2002-EU01-01 rev2.0
Est.reg No: 3009555547

Just turn
the dial

Instantly
adjustable